




ERGONOVA

Smart View

Массажер для глаз

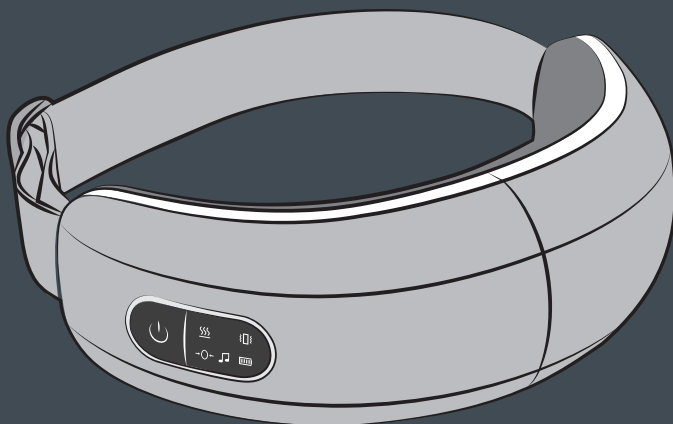

Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением массажера для глаз Ergonova Smart View! Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться им как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova - немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova – надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	2
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	3
ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7

Меры предосторожности

Внимание: Устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих или медицинских целях. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

Следующие группы лиц должны проконсультироваться с врачом перед использованием массажера.


1. Беременные
2. Страдающие от миопии свыше 8 диоптрий
3. Страдающие от глаукомы, катаракты
4. Не достигшие возраста 7 лет
5. Перенесшие апоплексический удар (инсульт)
6. После травмы глаз, в период реабилитации после перенесенной операции (кантопластики)
7. После хирургического лечения глаукомы, катаракты, отслойки сетчатки и других серьезных операций в области глаз.
8. Страдающие от воспалительных заболеваний глаз

Рекомендации по использованию

1. Отрегулируйте ремень массажера и откиньтесь на спинку кресла/дивана. Такое положение является наиболее удобным в использовании.
2. Рекомендуется использовать массажер один-два раза в день, каждый раз по 10-20 минут. Не открывайте глаза во время массажа.
3. Полностью зарядите массажер перед использованием.
4. После использования протрите поверхность влажной тканью или ватным тампоном, смоченным 75%-ным медицинским спиртом.
5. Не используйте массажер вблизи открытого огня, агрессивных жидкостей и других неблагоприятных сред.

Эксплуатация

Версия с функцией Bluetooth

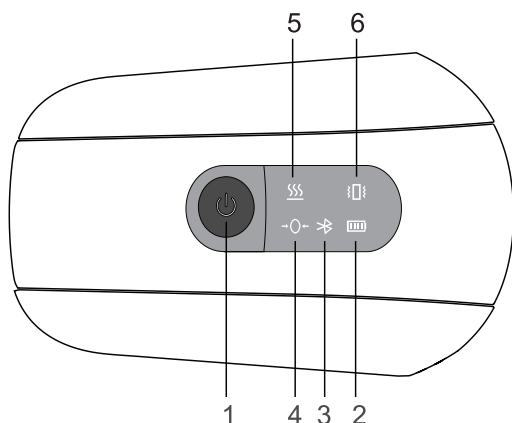

1. Запуск:

Длительное нажатие ВКЛ /ВЫКЛ.
Короткое нажатие переключает режимы.

2. Зарядка:

Индикатор мигает при низком уровне зарядки.

Индикатор мигает во время зарядки.

Индикатор горит при полной зарядке.

3. Bluetooth

4. Воздушно-компрессионный массаж

5. Подогрев

6. Вибрация


Режим	Воздушно-компрессионный массаж	Подогрев	Вибрация	Bluetooth	Таймер
Energy Mode («Энерджи»)	✓	✓	✓	✓	10
Relax Mode («Расслабление»)	✓	✓		✓	15
Relieve Mode («Успокаивающий»)	✓	✓		✓	15
Sleep Mode («Режим сна»)	✓			✓	20

Описание функций

1. Звуковые уведомления
2. Множественная вибрационная функция
3. Подогрев до 42°C
4. Управление одной кнопкой
5. Разъем Type-C

6. При низком уровне аккумулятора индикатор мигает и каждые 2 минуты раздается звуковой сигнал. При полной разрядке массажер отключается. При включении питания трижды раздается звуковой сигнал.
7. Четыре режима: Energy Mode («Энерджи»), Relax Mode («Расслабление»), Relieve Mode («Успокаивающий»), Sleep Mode («Режим сна»).

Версия с функцией проигрывания музыки

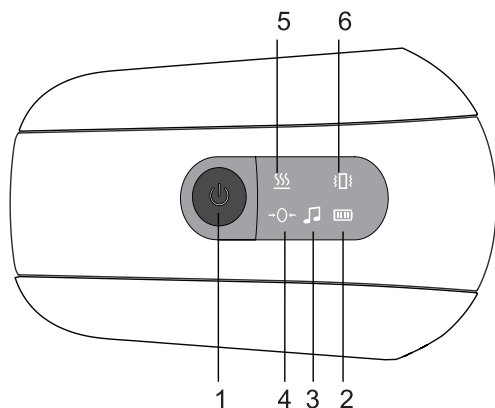

1. Запуск :

Длительное нажатие ВКЛ /ВЫКЛ.
Короткое нажатие переключает режимы

2. Зарядка:

Индикатор мигает при низком уровне зарядки. Индикатор мигает во время зарядки. Индикатор горит при полной зарядке.

3. Музыка

4. Воздушно-компрессионный массаж

5. Подогрев

6. Вибрация

Режим	Воздушно-компрессионный массаж	Подогрев	Вибрация	Музыка	Таймер
Energy Mode («Энерджи»)	✓	✓	✓	✓	10
Relax Mode («Расслабление»)	✓	✓		✓	15
Relieve Mode («Успокаивающий»)	✓	✓			15
Sleep Mode («Режим сна»)	✓			✓	20

Описание функций

1. Звуковые уведомления

2. Множественная вибрационная функция

3. Подогрев до 42°C


4. Управление одной кнопкой

5. Разъем Type-C

6. При низком уровне аккумулятора индикатор мигает и каждые 2 минуты раздается звуковой сигнал. При полной разрядке массажер отключается. При включении питания трижды раздается звуковой сигнал.

7. Четыре режима: Energy Mode («Энерджи»), Relax Mode («Расслабление»), Relieve Mode («Успокаивающий»), Sleep Mode («Режим сна»).

Версия с функцией голосового помощника

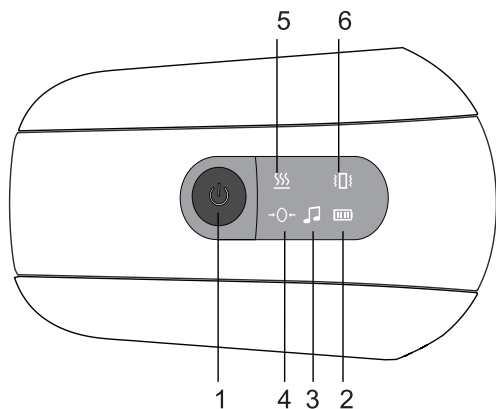

1. Запуск :

Длительное нажатие ВКЛ /ВЫКЛ.
Короткое нажатие переключает режимы

2. Зарядка:

Индикатор мигает при низком уровне зарядки. Индикатор мигает во время зарядки. Индикатор горит при полной зарядке.

3. Музыка:

Белый цвет: музыка по умолчанию

Синий цвет: Bluetooth

4. Воздушно-компрессионный массаж

5. Подогрев

6. Вибрация

Режим	Воздушно-компрессионный массаж	Подогрев	Вибрация	Музыка	Bluetooth	Таймер
Energy Mode («Энерджи»)	✓	✓	✓	✓	✓	10
Relax Mode («Расслабление»)	✓	✓		✓	✓	15
Relieve Mode («Успокаивающий»)	✓	✓		✓	✓	15
Sleep Mode («Режим сна»)	✓			✓	✓	20


Описание функций

1. Голосовой помощник и распознавание речи
2. Множественная вибрационная функция
3. Поддержание температуры подогрева 42°C
4. При низком уровне аккумулятора индикатор мигает и каждые 2 минуты раздается звуковой сигнал.
5. Четыре режима: Energy Mode («Энерджи»), Relax Mode («Расслабление»), Relieve Mode («Успокаивающий»), Sleep Mode («Режим сна»).

6. Функции интеллектуального переключения между проигрыванием музыки и подключением через Bluetooth, при подключении устройства Bluetooth (например, мобильного телефона и компьютера) воспроизведение по Bluetooth осуществляется автоматически.
7. Управление одной кнопкой
8. Кабель Type-C для зарядки

Извлечение аккумулятора

1. Снимите крышку аккумулятора
2. Открутите шесть винтов под крышкой
3. Извлеките аккумулятор

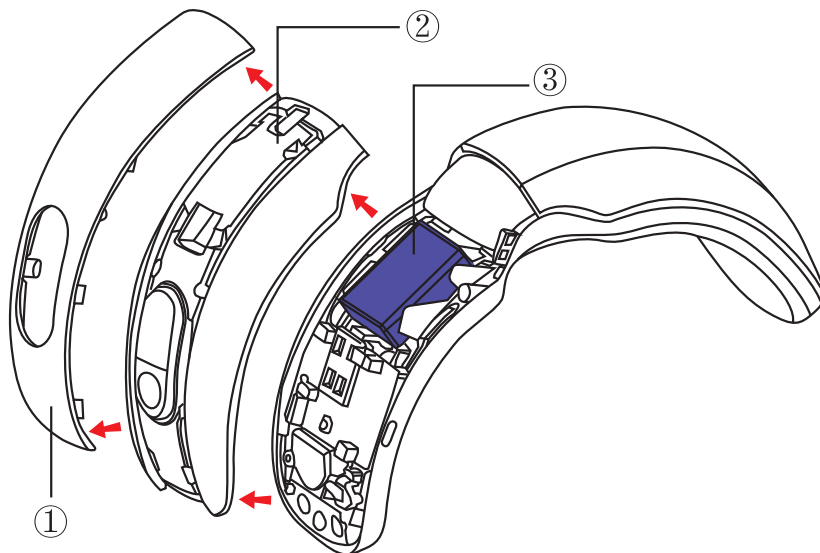

УТИЛИЗАЦИЯ



По истечении срока службы массажера и аксессуаров (включая литиевый аккумулятор), пожалуйста, утилизируйте их надлежащим образом. Переработка электронных отходов – основное условие защиты окружающей среды. Перед утилизацией аккумулятор необходимо вынуть из прибора. При извлечении аккумуляторной батареи необходимо отключить прибор от электросети; после извлечения аккумулятор следует безопасно утилизировать.

Технические характеристики

1. Название: Массажер для глаз
2. Входной ток: DC5V 1A сигнал
3. Номинальная мощность: 5 Вт
4. Аккумулятор: Встроенный литий-ионный аккумулятор 3,7В 1200 мАч

Дата производства: смотрите на упаковке.

Сделано в Китае

тел. 8-800-700-14-29

www.ergonova.ru

info@ergonova.ru

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены





Designed by Ergonova Germany
www.ergonova.ru

